

www.ortopediaguzman.com

JAY[®]

Cojín JAY BALANCE

Protección de la piel, estabilidad y confort



El equilibrio perfecto entre protección de la piel y estabilidad

Descubre el equilibrio con Jay Balance

JAY ha desarrollado el nuevo cojín Jay Balance tras años de experiencia en el mercado ofreciendo la más alta protección de la piel con la máxima estabilidad y confort .

PROTECCIÓN DE LA PIEL Y CONFORT. La forma contorneada de la base y su composición de espuma suave permiten la inmersión de las tuberosidades isquiáticas y los trocánteros protegiendo así la piel del usuario y maximizando su confort durante la sedestación. La exclusiva forma trasera de la hondonada evita migraciones del fluido y gracias al sistema de 2 fundas, Jay Balance proporciona al mismo tiempo respiración de la piel y protección anti-humedad del cojín.


ESTABILIDAD Y POSICIONAMIENTO gracias a la forma y tamaño de la hondonada pélvica y a las cuñas de posicionamiento que pueden añadirse fácilmente a la funda interior del cojín para adaptarse a las necesidades de posicionamiento específicas de cada usuario.





Base de espuma contorneada, multi-capa

El cojín Jay Balance tiene una base contorneada, conformada a partir de espuma de celdas cerradas. Su especial diseño en la zona del fémur y en la parte trasera ayuda a prevenir la migración del fluido, al mismo tiempo que proporciona un suave soporte a los trocánteres y a la parte posterior de la pelvis.

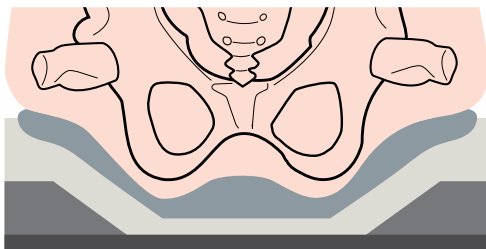

La anchura de la hondonada pélvica es el resultado de un estudio en el que se han observado las dimensiones medias de la pelvis para cada una de las tallas de cojín. Esto hace que la hondonada del Jay Balance tenga las dimensiones idóneas para ofrecer a la gran mayoría de usuarios estabilidad anterior y lateral, un correcto posicionamiento y con ello asegurar los objetivos clínicos de inmersión de las zonas de riesgo y distribución del peso para una protección máxima de la piel.



Relleno de la hondonada pélvica - Tecnología de Fluido JAY™ o aire ROHO™

La hondonada pélvica es la pieza clave del cojín. Es la parte que envuelve las prominencias óseas de la pelvis maximizando el reparto de presiones y manteniendo la buena integridad de la piel.

El cojín Jay Balance ofrece 2 opciones para el relleno de la hondonada: bolsa de fluido JAY o bolsa de aire ROHO. Ambas se ajustan perfectamente a la forma de cada individuo, a su posición sentado, y aseguran la colocación adecuada del fluido/aire por debajo de las prominencias óseas para óptima protección de la piel.

www.ortopediaguzman.com



El diseño especial de la bolsa de fluido JAY garantiza resultados óptimos durante todo el ciclo de vida del cojín.



El nivel de aire de la bolsa ROHO puede ajustarse para acomodar posturas asimétricas o cambios del paciente.



Kit de posicionamiento (opcional)

Las cuñas y soportes contenidos en este kit permiten un correcto posicionamiento de la pelvis y las piernas, ofreciendo solución a múltiples necesidades clínicas. Favorecen la alineación corporal, aumentan la tolerancia a la sedestación y permiten la adaptación a futuros cambios en las necesidades del usuario.

www.ortopediaguzman.com



Tecnología de doble funda

- Para garantizar la comodidad y protección del usuario, Jay Balance incorpora de serie 2 fundas: una interior y otra exterior. Aunando las ventajas de cada una de ellas es posible conseguir el equilibrio perfecto entre óptima ventilación de la piel y una efectiva protección del cojín frente a la incontinencia del usuario.
- La funda interior es impermeable y muy fácil de retirar y limpiar. Con tecnología Aqua-guard y cosido especial en la cremallera para garantizar que la base de espuma se mantenga siempre seca.
- La funda exterior Microclimática favorece la ventilación y disipa el calor y la humedad para una mayor protección de la piel. Jay Balance permite además seleccionar otros 2 tipos de funda exterior: Funda de Incontinencia o Funda Elástica.
- Todas las fundas exteriores se caracterizan por su excepcional flexibilidad. Esto es importante ya que permite incorporar al cojín las cuñas de posicionamiento sin generar tensiones y ayuda a reducir el riesgo de desarrollar úlceras por presión. Además pueden lavarse a máquina hasta 60° C y son de secado rápido.





JAY BALANCE

Anchura del cojín	www.ortopediaguzman.com 34 cm a 60 cm
Profundidad del cojín	34 cm a 60 cm
Altura del cojín	8,5 cm
Peso máximo de usuario	150 kg (anchos de 34 cm a 50 cm); 225 kg (anchos de 56 cm a 60 cm)
Peso del cojín	2,3 kg (cojín de 40 x 40 cm con fluido); 1,6 kg (cojín de 40 x 40 cm con aire)
Relleno de la hondonada	Fluido o Aire (de 1 o 2 válvulas)
Funda exterior	De Incontinencia, Microclimática o Elástica
Kit de posicionamiento	Opcional



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga

Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34

Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es