

www.ortopediaguzman.com



WHERE YOU WANT TO BE.

Sapphire^{®2}

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com



www.ortopediaguzman.com



Sapphire^{®2}

Gran maniobrabilidad
con la máxima estabilidad

www.ortopediaguzman.com



www.ortopediaguzman.com



Nunca transportar tu scooter fue tan fácil como ahora

Desmontable

Desmontar la nueva Sapphire®2 es pan comido.

Solo tienes que retirar el asiento, sacar las baterías y tirar hacia arriba de la palanca de desmontaje para separarla rápidamente en dos partes muy manejables. ¡Así de fácil!



www.ortopediaguzman.com

El sistema de desmontaje permite separar la Sapphire®2 en 2 partes rápidamente, sin incómodos cables ni conexiones.

Transportable

Ahora puedes transportar tu Sapphire®2 en el coche sin problemas porque, además de desmontarse en dos partes, cuenta con el sistema de doble asa Sterling® Lift. Estas dos asas son una importante ayuda para levantar el tren trasero y meterlo por ejemplo en el maletero del coche.



Doble asa para levantar más cómodamente el tren trasero.



El manillar se abate completamente para su transporte.

Para llevártela muy lejos

¡Listo! Y ahora disfruta de todas las ventajas y comodidades de la Sterling Sapphire®2: estabilidad de 4 ruedas, amplio espacio para los pies, empuñaduras amplias y ergonómicas, baterías de muy fácil instalación, gran confort...



Mandos muy accesibles y cómodos




Amplio espacio para los pies.

www.ortopediaguzman.com

Sapphire^{®2}

Gran maniobrabilidad con la máxima estabilidad

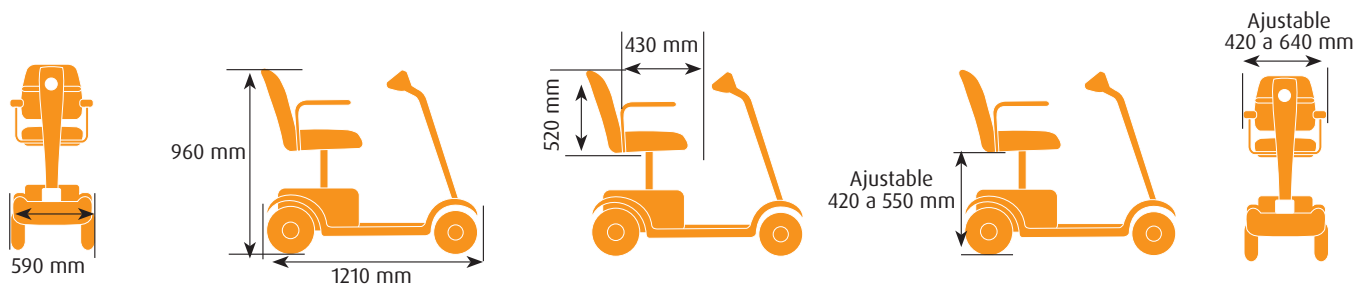

Especificaciones técnicas

Versión	4 ruedas	Peso de la parte mínima más pesada (tren delantero)	22,5 kg
Anchura total	590 mm	Peso del asiento	12,5 kg
Longitud total	1210 mm	Peso de la unidad tractora	19,5 kg
Altura total	960 mm	Peso de las baterías (unidad)	12 kg
Altura de asiento	Ajustable 420 a 550 mm	Radio de giro	1400 mm
Velocidad	6,5 km/h	Pendiente máxima de seguridad	
Baterías	35 Amp		14° (peso usuario 113 kg) ó 10° (peso usuario 150kg)
Cargador (incorporado)	5 Amp	Distancia del suelo a la base	95 mm
Autonomía máxima*	30 km	Cubiertas	Neumáticas
Color	Gris	Ruedas delanteras	225 mm (9")
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	150 kg	Ruedas traseras	265 mm (10.5")
Peso total	79 kg	Luces	Si

Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
487198 Arankudiaga, Vizcaya

Tel.: 902 14 24 34

Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es



Rev.2- Mayo 2015

